

各部の名称

■キャストステー

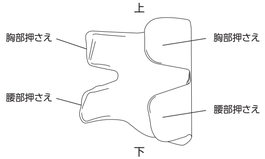


■ステーカバー


〈表〉

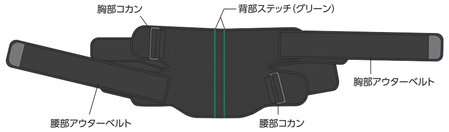

〈裏〉

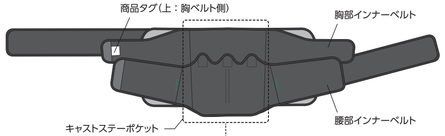

〈ポケット開放状態〉

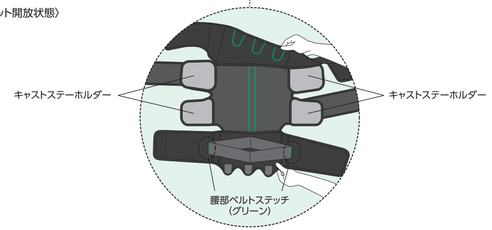

※面ファスナー使用部分：各ベルト、キャストステーポケット
※キャストステーポケット内にはキャストステー（固定するギプス）が入っています。

製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

取扱上のご注意

保管方法

●本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接あたる場所などには置かないでください。
●水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温で保管してください。

洗濯方法
（ステーカバー）

●必ずキャストステーを取り出し、中性洗剤を使用し、30℃以下の水で手洗いしてください。
●面ファスナーはすべてとめてください。
●他のものと一緒に洗濯しないでください。
●柔軟剤、塩素系漂白剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
●洗濯後は陰干しし、十分に乾燥させてからご使用ください。
●洗濯乾燥後は、使用手順を参考に、キャストステーを挿入してご使用ください。
●装着時に濡れた状態で面ファスナーをとめると外れるおそれがあります。

廃棄方法

●本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

品質表示

キャストステー：（芯材層）ガラス繊維編物、水硬化性ポリウレタン樹脂
（被覆層）ポリエステル不織布
ステーカバー：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿、ポリアセタール

アルケア株式会社
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

2609-2

つなぐ手あて、ひらくケア。

フィットキュア®・ランバー
Fit Cure-Lumbar

カバー付きキャスティングシステム
Casting System with Cover

取扱説明書 使用者向け

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 使用者本人が使用方法を十分理解できない場合は、保護者の方から説明をしてください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。
- 本品を適切に装着できるように、必ず医療従事者の指導に従ってください。
- 本品の設定を変更する場合は、必ず医療従事者に実施してもらってください。

一般医療機器／単回使用医療機器
ギプス包帯
医療機器届出番号：13B1X00207000083

お客様相談室 0120-770-175
（土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30）
www.alcare.co.jp

はじめに

《フィットキュア・ランバー》は、腰椎の骨折などにおける支持、固定を目的に開発された商品です。
安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

＊[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。
⚠警告……人身事故につながるおそれのある注意事項
注　意……物損事故につながるおそれのある注意事項


⚠警　告

●本品の装着状況に応じた装着管理（就寝時、本品の取り外しの可否、ベルトの締め加減、装着位置、装着時間、装着期間など）については、必ず医療従事者の指示に従ってください。
●本品の装着中、品質表示で使用している素材に対するアレルギーの発現や過敏な状態になってしまった方は、医療従事者に相談してください。
●本品の装着中、過度の圧迫や傷つたあたり、締め付けすぎなどに注意してください。装着時に痛み、しびれ（神経障害）、血行障害、皮膚障害などの異常が生じた場合は各ベルトをゆるめ、医療従事者に連絡してください。
●本品の装着中、ずれやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。ずれやゆるみがあると本品の正しい機能が得られないおそれがあります。
●装着位置の調整やステーカバーの洗濯などでキャストステーに触れる際は、被覆層の隙間に指を入れないようご注意ください。硬化後のキャストステーは非常に硬く、芯材層の縁に棘が生じる場合があります。また、キャストステーの被覆層には隙間があるため、指が入り込むと芯材層の縁の棘により手指や皮膚などを傷つけるおそれがあります。
●本品の装着中、本品に対して無理な力や荷重をかけないでください。本品の変形や破損により、けがや症状の悪化を引き起こすおそれがあります。
●本品の装着中、汗が気になる場合や水に濡れてしまった場合は、タオルなどで拭き取り、よく乾かしてください。水分を含む湿った状態で使用すると皮膚かぶれなどのおそれがあります。
●面ファスナーは汗や水で濡れた状態で使用しないでください。面ファスナーは濡れた状態でとめると外れるおそれがあります。
●本品の装着中、ステーカバーに使用している面ファスナーのフックにより手指や皮膚などを傷つけるおそれがあるため、ご注意ください。
●本品の装着中、ステーカバーおよびキャストステーの破損や面ファスナーが外れやすくなった場合は、直ちに医療従事者に連絡してください。

注　意

●本品の調整が必要な場合は、使用者自身および保護者による本品の改造・加工は行わず、医療従事者に相談し、指示に従ってください。
●面ファスナーのフックで衣料品などを傷つけるおそれがあるため、十分に気をつけてください。
●洗濯機や乾燥機などの使用は、本品が破損するだけでなく、使用している素材により洗濯機や乾燥機などが故障するおそれがあるため、使用を避けてください。ステーカバーは「洗濯方法」を参照してください。

装着図

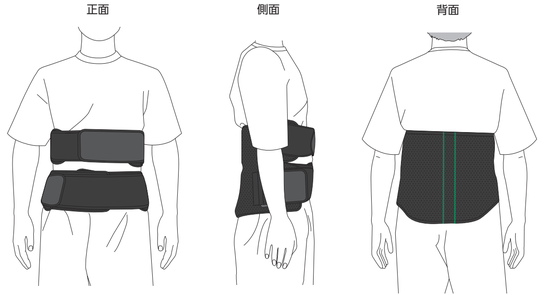

※必ずキャストステーが入っている状態で装着してください。


使用手順

装着の前に

注 意

●医師の指示により着脱が許可された場合に、医師の指導および手順に従って正しく装着してください。

※背部ステッチ（グリーン）が背中の中央にくるように装着してください。
※装着しづらい場合は、鏡を見ながら行ってください。

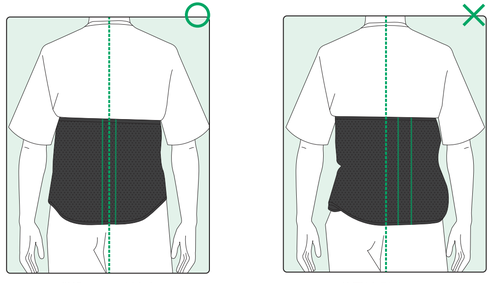


背部ステッチが中央

位置がずれている


使用手順

❶ ステーカバーを背中にあて、胸部インナーベルトを胸の下あたりで仮とめします。

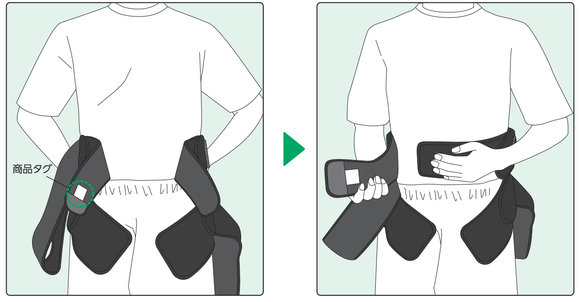


POINT
本品の上下にご注意ください。商品タグが付いているベルトが胸部インナーベルト（頭側）になります。

❷ 腰部インナーベルトを、骨盤（こつばん）を覆う位置に合わせてとめます。

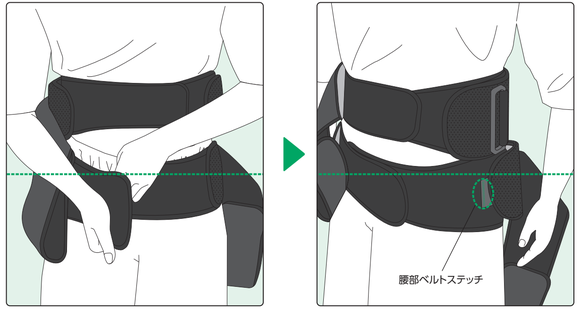


腰部ベルトステッチ上端の高さを、へそ（点線）の少し下あたりの位置に合わせてとめます。

❸ ❶で仮とめした胸部インナーベルトをしっかりとめ直します。
※女性の場合、下着の金具などにより圧迫がかからないようにしてください。

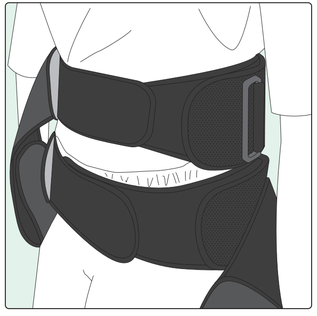


❹ 胸部アウターベルトを胸部コカン、腰部アウターベルトを腰部コカンに通し、折り返してとめます。

（上）胸部アウターベルト

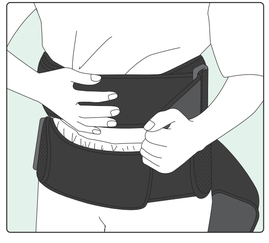

（下）腰部アウターベルト

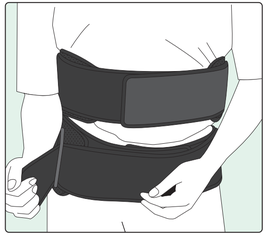


POINT
本品が周径方向にねじれていないことを確認してください。ねじれがある場合は、一度ベルトを外し、正しい位置に装着し直してください。


※装着位置が正しいこと、局所的な過度の圧迫や食い込み、あたりなどがないことを確認します。
※ベルトは締め付けすぎたり、ゆるすぎたりしないように調整した後、面ファスナーをしっかりとめてください。

キャストステーの取り出し・挿入方法

●本品のキャストステーポケットにはキャストステー（固定するギプス）が入っています。
●洗濯前には必ずキャストステーを取り出し、洗濯後にはキャストステーをキャストステーポケットに挿入します。
「洗濯方法」を参照してください。
●キャストステーは洗濯できません。
●洗濯後の再使用時には、必ずキャストステーをステーポケットの奥まで入れ、面ファスナーを閉め、装着を行ってください。
●キャストステーには上下・表裏があります。必ず図の手順に従って挿入してください。

① ステーカバーのすべての面ファスナーを外し、裏面を上にして、キャストステーポケットを開きます。

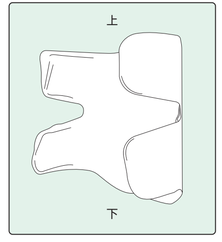

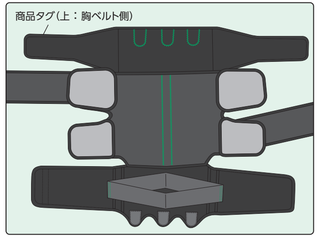

POINT
本品の上下にご注意ください。商品タグが付いているベルトが胸部インナーベルト（頭側）になります。

② キャストステーホルダー（4カ所）にキャストステーを差し込み、キャストステーポケットを閉じ、面ファスナーをとめます。
※キャストステーホルダーが内側を向くように挿入してください。

